


1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™ Works Edition

Maximize a performance com o tempo médio de varredura 30% mais rápido

O tempo de varredura mais rápido leva a um maior rendimento

- Ganhe capacidades clínicas avançadas e melhore a produtividade com SIGNA™ Works
- Melhore a SNR até 27% com a tecnologia Optical RF (OpTix RF)*
- Acelere o tempo de exame até 50% com o HyperWorks
- Velocidade avançada de reconstrução de imagem com o mais recente Mecanismo de Reconstrução

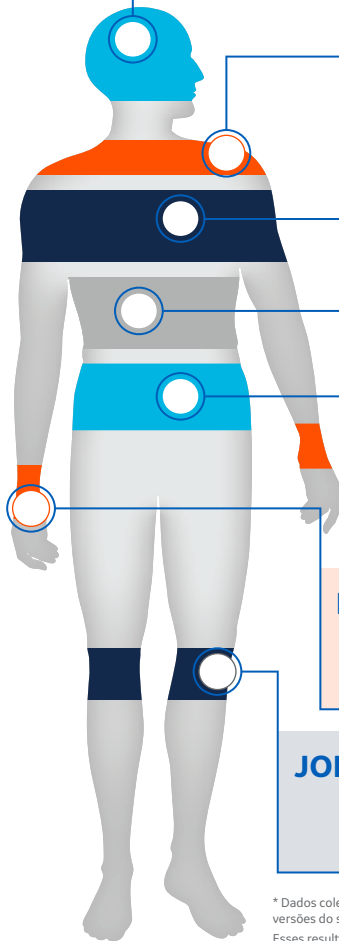

	Sequências individuais	Tempo do SIGNA™ HDxt (minutos)	Tempo do SIGNA™ Works Edition (minutos)	Redução no tempo (min, %)
CÉREBRO	FLAIR T1 Sagital PROPELLER T2 Axial FS FLAIR T2 Axial b1000 DWI Axial FS TOF 3D Axial FSE T1 Axial	14:09	9:19	4:50 34%
OMBROS	FST2 Coronal T1 Coronal FS DP Sagital FS DP Axial MERGE 3D Axial	23:24	16:12	7:12 31%
COLUNA CERVICAL	T2 Sagital T1 Sagital STIR Sagital MERGE 3D Axial FSE-Flex T1 Sagital	18:31	10:59	7:32 41%
COLUNA TORÁCICA	T2 Sagital T1 Sagital T2 Axial T1 Axial	18:10	10:10	8:00 44%
COLUNA LOMBAR	T2 Sagital T1 Sagital T2 Axial	11:22	7:44	3:38 32%
PULSO	DP Coronal FSE-Flex DP Coronal FS DP Axial T1 Sagital MERGE 3D Coronal	23:07	13:56	9:11 40%
JOELHOS	DP Sagital FS DP Sagital T1 Coronal FS DP Coronal FS DP Axial	14:25	10:02	4:23 30%

* Dados coletados usando o software SIGNA™ HDxt 1.6x e o SIGNA™ HDxt SIGNA™ Works Edition. Os mesmos parâmetros de protocolo em ambas as versões do sistema, incluindo as mais novas e mais recentes melhorias e recursos no SIGNA™ Works Edition. Esses resultados são apenas para fins ilustrativos. Eles podem variar dependendo dos protocolos e circunstâncias selecionadas pelo cliente. Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador. Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado. © 2021 General Electric Company. SIGNA é uma marca registrada da General Electric Company

JB005908R

3004 2525 capitais e regiões metropolitanas | 08000 165 799 demais localidades | gehealthcare.com.br

